

본 책자에 나와 있는 적용 가능한 기술은 개인의 사례에 동일하게 적용 될 수 있는 것이 아니며, 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.

The Bluetooth 마크 및 로고에 대한 소유권은 Bluetooth SIG, Inc.에 있으며 Signia GmbH의 특정한 마크는 허가를 받아 사용하고 있습니다. 기타 다른 상표와 상품명은 해당 소유주에 있습니다.

구글플레이는 Google Inc.의 상표이며, 앱스토어는 Apple Inc.의 상표입니다.

© 10.2022. Signia Ltd.

# 시그니아 보청기 제품 안내서

2022. 10




# Be Brilliant™




signia



 공식 웹사이트



 공식 유튜브





## Contents



시그니아 브랜드	4
시그니아 AX 플랫폼	6
이어웨어 3.0	8
제품 한눈에 보기	10
플랫폼별 주요 기능 살펴보기	12
시그니아 AX	14
시그니아 X	16
시그니아 Nx	18
시그니아 px	19
보청기 액세서리	20
액세서리 호환표	21
시그니아 앱	22
시그니아 보청기 색상	24
시그니아 히스토리 / 수상내역	26



Be  
Brilliant™



시그니아는 전 세계적으로 인정받는  
최고의 보청기 브랜드입니다.

140년이 넘는 세월동안 시대를 앞서가는  
혁신적인 제품들을 출시하며  
보청기의 역사를 새롭게 써내려 왔습니다.

## 혁신의 아이콘, 시그니아

시그니아는 독자적인 기술력을 바탕으로  
착용자들이 자신감을 갖고 최고의 역량을 발휘하여  
어떤 상황에서든 빛날 수 있도록 돕는 일을 목표로 합니다.

단순히 소리를 키워주는 역할을 하는 것이 아니라,  
착용자가 다시금 찬란한 인생을 즐길 수 있도록  
시그니아가 든든한 지원군이 되어드리겠습니다.

Be Brilliant with Signia




# 세계 최초 사운드 분리 증강 기술 시그니아 AX



두 배로, 더 선명하고  
두 배로, 더 자연스럽게!

시그니아 AX는 세계 최초로 사람 말소리와 배경 소음을 완벽하게 분리하여 처리하는 사운드 분리 증강(Augmented Focus™) 기술을 구현해냈습니다.

말소리와 배경음이 두 개의 프로세서를 통해 두 배로 처리되기 때문에 사람 말소리는 자연스럽게 집중할 수 있도록 더욱 크고 선명하게, 그리고 배경음은 말소리를 방해하지 않는 정도로 자연스럽게 들려줍니다.

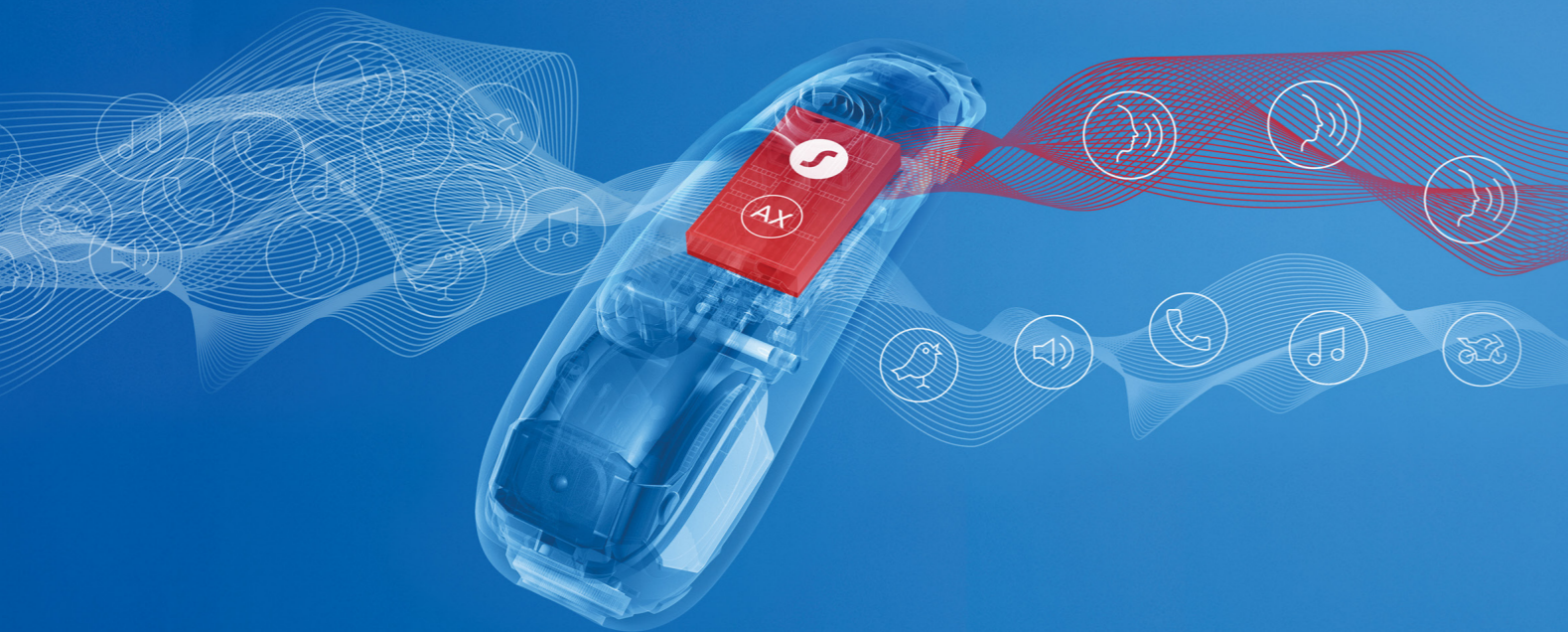

## 시그니아 AX, 소리의 3D를 완성하다!

일반 보청기



AX 보청기



마치 3D 영화를 보는 것처럼 더욱 생생하고 입체적인 소리!  
사운드 분리 증강 기술을 통해 경험할 수 있습니다.

사람의 뇌가 소리의 대비를 통해 중요한 말소리를 잘 처리하는 것처럼,  
AX 플랫폼의 사운드 분리 증강 기술은 말소리와 배경음을 명확하게 대비시켜 들려줍니다.

귓속형

New



인시오 C&G AX

슬림오픈형

New



스타일레토 AX

오픈형

New



휴어 C&G AX

New



휴어 C&G T AX

New



휴어 312 AX



# 이어웨어 3.0

**작은 디테일이 완벽함을 만듭니다.**

보청기의 착용감을 완성시켜주는 업그레이드된 이어웨어 3.0을 만나보세요.

### 귀에 착 붙는 스타일!


미니리시버 3.0의 사이즈가 기존보다 25% 작아졌습니다. 오른쪽 사진처럼 미니리시버 3.0은 귀에 딱 붙어 더욱 눈에 띄지 않는 스타일로 업그레이드 되었습니다.



미니리시버 3.0

### 차원이 다른 편안함!

이어팁 3.0과 슬리브 3.0은 착용자의 귀에 닿는 부분이 매우 부드러워 귀구멍이 작은 착용자들도 편안하게 안정적인 착용감을 느낄 수 있습니다.

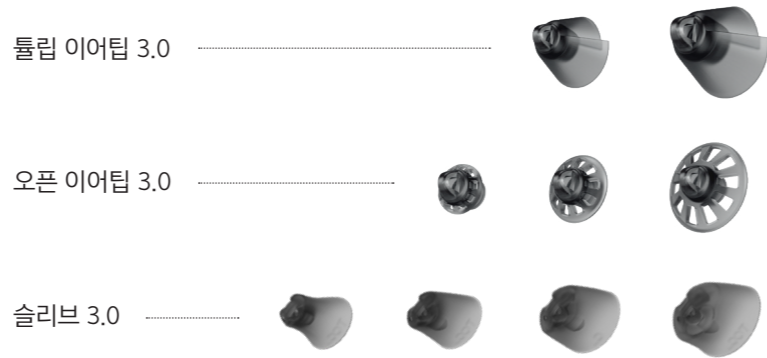

### 교체도 쉽고 편리하게!

이어팁 3.0과 슬리브 3.0은 교체가 쉽고 편리합니다. 누구나 쉽게 이어웨어를 교체할 수 있어 본인에게 가장 잘 맞는 착용감을 섬세하게 조절할 수 있습니다.



## 제품 호환표

시그니아 보청기와 각각 호환 가능한 이어웨어 3.0 제품들을 확인해 보세요.

	미니리시버 3.0	슬리브 3.0 이어팁 3.0	이어몰드 3.0	썬튜브 3.0	썬튜브	미니리시버 2.0	클릭돔 / 클릭슬리브	클릭몰드
퓨어 AX 시리즈	●	●	●	-	-	-	-	-
스타일레토 AX 시리즈	●	●	-	-	-	-	-	-
모션 X 시리즈*	-	●	●	●	-	-	-	-
퓨어 X 시리즈	-	-	-	-	-	●	●	●
스타일레토 X 시리즈	-	-	-	-	-	●	●	-
모션 Nx 시리즈	-	-	-	-	●	-	-	-

\* 모션 SP X 는 썬튜브와 호환 불가



# 시그니아 제품 한눈에 보기



블루투스 충전식

슬림 오픈형 보청기

오픈형 보청기

기성형  
귓속형 보청기

귀걸이형 보청기

귓속형 보청기



스타일레토 AX  
경 중고



퓨어 C&G AX  
퓨어 C&G T AX  
퓨어 312 AX  
경 중고 경 중고



인시오 C&G AX ITC  
경 중고

모델 : 7AX / 5AX / 3AX  
채널 : 20 / 16 / 12

제품명  
난청적합범위

Signia Xperience



스타일레토 X  
경 중고



퓨어 C&G X  
퓨어 312 X  
경 중고 경 중고



시그니아 액티브  
경 중



모션 C&G X  
모션 C&G P X  
모션 C&G SP X  
경 중고 경 중고 경 중고 심

모델 : 7X / 5X / 3X / 2X / 1X  
채널 : 20 / 16 / 12 / 8 / 8

제품명  
난청적합범위

\* 시그니아 액티브 프로/액티브는 7/1 모델만 가능  
\* 모션 C&G SP 7X는 16 채널

Signia Nx



모션 13P Nx  
경 중고



인시오 Nx IIC  
인시오 Nx CIC  
인시오 Nx ITC  
인시오 Nx ITC BT  
경 중 경 중고 경 중고 경 중고


모델 : 7Nx / 5Nx / 3Nx / 2Nx / 1Nx  
채널 : 20 / 16 / 12 / 8 / 8

제품명  
난청적합범위

primax



인투이스 3 RIC  
경 중고

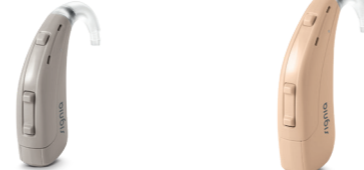

인투이스 3 / 프롬프트 P  
인투이스 3 / 프롬프트 SP  
경 중고 경 중고 심



인투이스 3 / 프롬프트 CIC  
인투이스 3 / 프롬프트 ITC  
경 중고 경 중고

채널 : 인투이스 6 / 프롬프트 4

제품명  
난청적합범위












# 플랫폼별 주요 기능 살펴보기

	<b>다이렉트 스트리밍</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 보청기와 스마트폰 기기를 블루투스로 직접 연결</li> <li>- 시그니아의 블루투스 연결 기능은 배터리 효율이 좋은 방식으로 보청기 사용 시간을 크게 단축시키지 않아 더욱 편리함</li> </ul>
	<b>핸즈 프리</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 보청기의 마이크를 전화 통화 시에 사용할 수 있는 기능</li> <li>- 아이폰에만 지원하는 기능이며, 이 기능을 사용할 수 없을 때는 휴대전화의 마이크를 이용해서 통화 가능</li> </ul>
	<b>본인 목소리 처리 기술</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 보청기 착용시 느끼는 본인 목소리 증폭 효과를 개선하는 기능</li> <li>- 시그니아만의 독보적 기술</li> </ul>
	<b>양이 무선 통신 기술</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 보청기를 좌우로 착용했을 때 두 대의 보청기가 서로 데이터 및 소리를 교환함으로써 시너지를 내는 기술</li> <li>- 보청기 음질을 결정 짓는 핵심 기술 중 한 가지</li> </ul>
	<b>오토 에코실드</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 기존의 에코실드에서 업그레이드 된 기능</li> <li>- 강당 등 소리 울림이 큰 공간에서 반향음 자동 감소</li> </ul>
	<b>My 웰빙</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 시그니아 앱에서 지원하는 기능으로 보청기 착용자의 건강 상태를 체계적으로 관리</li> <li>- 시그니아에만 있는 My 대화 기능 등이 주요 특징</li> </ul>
	<b>X 센서</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 음향센서와 모션센서가 탑재되어 다양한 청취 상황에 맞게 소리를 자동 조절</li> </ul>
	<b>시그니아 어시스턴트</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 시그니아 앱에서 지원하는 주요 기능 중 하나로 세계 최초로 실시간 머신러닝을 바탕으로 보청기 착용자의 불편함 즉각 해결</li> </ul>
	<b>좁은 방향성</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 최대 15도까지 집중할 범위를 좁혀 앞 상대방의 말소리를 더욱 잘 들리게 하는 기능</li> </ul>

시그니아 독점기술

시그니아 독점기술

시그니아 독점기술

 	Signia 	Signia 	
			-
	-	-	-
2.0	1.0	1.0	-
4.0	3.0	3.0	2.0
●	-	-	-
●	-	-	-
●	●	-	-
●	●	-	-
●	●	●	●



# 시그니아 AX 7AX / 5AX / 3AX



## 스타일레토 AX

- X 시리즈보다 한층 더 슬림해진 디자인
- X 시리즈보다 넓어진 색상 선택 옵션
- X 시리즈보다 길어진 충전 후 사용 시간
- Qi 무선 충전이 가능한 이동식 충전기
- 기본 충전기 외 충전, 건조, 살균이 동시에 가능한 드라이 앤 클린 충전기 사용 가능

## 퓨어 C&G AX / 퓨어 C&G T AX

- X 시리즈보다 한층 더 작고 우아해진 디자인
- X 시리즈보다 길어진 충전 후 사용 시간
- 언제 어디서나 사용 가능한 이동식 충전기
- 기본 충전기 외 충전, 건조, 살균이 동시에 가능한 드라이 앤 클린 충전기 및 스탠다드 충전기 사용 가능


모델	스타일레토 AX	퓨어 C&G AX / 퓨어 C&G T AX
난청적합범위	경 중 고	경 중 고
출력/이득	S : 110/46 M : 119/60 P : 122/65	S : 110/46 M : 119/60 P : 122/65 HP : 131/75
배터리	슬림 리튬이온충전식 배터리	리튬이온충전식 배터리
충전 및 사용시간	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>최대 20 시간</p> <p>4시간 완전 충전 시</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>최대 7 시간</p> <p>30분 급속 충전 시</p> </div> </div> <p>*완전 충전된 충전기로 보청기 4번 재충전 가능</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>최대 28 시간</p> <p>4시간 완전 충전 시</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>최대 7 시간</p> <p>30분 급속 충전 시</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>최대 39 시간</p> <p>4시간 완전 충전 시</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>최대 7 시간</p> <p>30분 급속 충전 시</p> </div> </div> <p>*완전 충전된 충전기로 보청기 4번 재충전 가능   *완전 충전된 충전기로 보청기 3번 재충전 가능</p>
충전기 옵션	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>스타일레토 충전기</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>드라이 앤 클린 충전기</p> </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>C&amp;G 충전기 III</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>스탠다드 충전기</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>드라이 앤 클린 충전기</p> </div> </div>

\* 스트리밍 사용 정도에 따라 보청기 사용 시간 상이할 수 있음

# 시그니아 AX 7AX / 5AX / 3AX



# 시그니아 X 7X / 5X / 3X / 2X / 1X

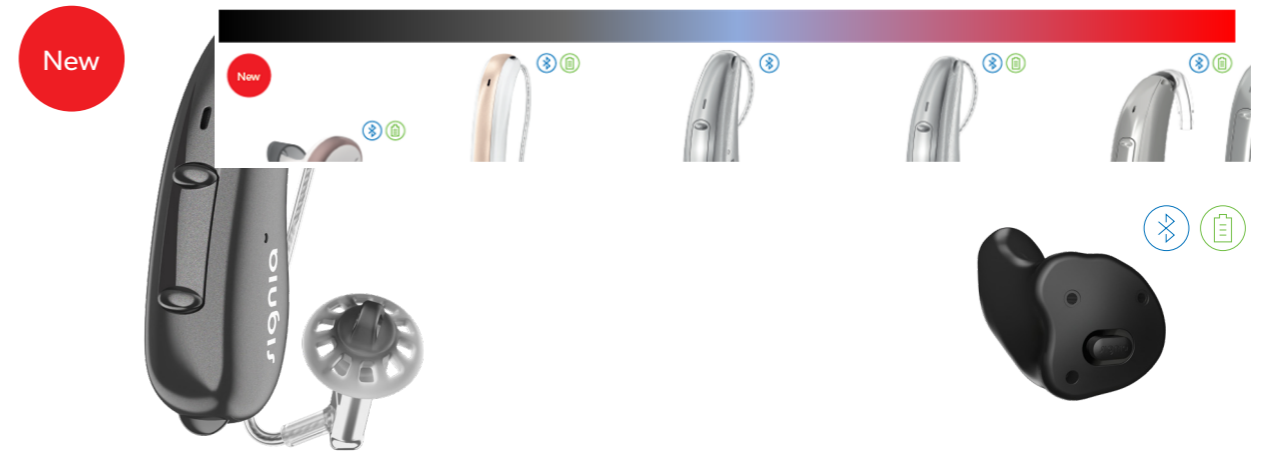

## 퓨어 312 AX

- X 시리즈보다 한층 더 작고 우아해진 디자인
- X 시리즈보다 길어진 배터리 사용 시간
- 시그니아의 스테디셀러로 가장 클래식한 제품
- 충전식 모델 사용에 어려움을 느끼시는 분들께 추천

## 인시오 C&G AX



- 기술력과 디자인 관련 권위있는 글로벌상 수상작
- 시그니아 최초의 무선 충전식 맞춤형 귓속형 제품
- 귓속형 보청기 최대 방수 방진 IP68 등급 보유
- 비접촉 충전방식으로 맞춤형 보청기 충전 최적화

모델	퓨어 312 AX	인시오 C&G AX
난청적합범위	경 중 고	경 중 고
출력/이득	S : 109/46 M : 117/58 P : 120/63 HP : 128/74	113/50 118/55 124/65
배터리	312	리튬이온충전식 배터리
충전 및 사용시간	<div style="text-align: center;"> <p>최대 93 시간</p> <p>배터리 1회 교체 시</p> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>최대 28 시간</p> <p>4시간 완전 충전 시</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>최대 5.5 시간</p> <p>30분 급속 충전 시</p> </div> </div> <p>*완전 충전된 충전기로 보청기 3번 재충전 가능</p>
충전기 옵션		<div style="text-align: center;"> <p>인시오 AX 충전기</p> </div>

\* 스트리밍 사용 정도에 따라 보청기 사용 시간 상이할 수 있음




# 시그니아 X 7X / 5X / 3X / 2X / 1X

## 시그니아 X 주요 기능



New

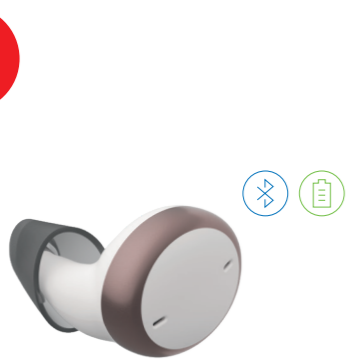

### 시그니아 액티브

- 구매 즉시 착용 가능
- 세계 3대 디자인 어워드 수상
- 휴대용 충전기로 이동 중 재충전 가능
- OVP 및 모션센서 미탑재

\* 시그니아 액티브 프로 및 시그니아 액티브 2개 모델

### 스타일레토 X

- 슬림한 디자인과 감각적인 컬러 매치
- 세계적인 디자인 어워드 2관왕 달성
- 완전 충전 시 최대 19시간 사용
- 휴대용 충전기로 이동 중 재충전 가능

### 퓨어 312 X

- Nx 시리즈보다 슬림해진 디자인
- 로커 스위치로 보청기 조절 편리
- HP리시버 사용 가능한 오픈형

### 퓨어 C&G X




- Nx 모델보다 크기 16% 감소
- Nx 모델보다 배터리 용량 20% 증가
- 완전 충전 시 최대 23시간 사용
- 로커 스위치로 보청기 조절 편리

### 모션 C&G X / 모션 C&G P X / 모션 C&G SP X

- 시그니아 최초의 충전식 귀걸이형 보청기
- 업계 유일의 고출력 충전식 귀걸이형 보청기
- 유소아를 위한 소형 이어후크/이어팁 가능
- 완전 충전 시 모델에 따라 24시간부터 최대 61시간 사용

모델	액티브 프로 / 액티브	스타일레토 X	퓨어 312 X
난청적합범위	경 중	경 중 고	경 중 고
출력/이득	118/42	S : 108/45 M : 119/60 P : 124/70	S : 108/45 M : 119/60 P : 124/70 HP : 130/75
배터리	리튬이온충전식 배터리	슬림 리튬이온충전식 배터리	312
충전 및 사용시간	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>최대 26 시간</p> <p>4시간 완전 충전 시</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>최대 5 시간</p> <p>30분 급속 충전 시</p> </div> </div> <p>* 완전 충전된 충전기로 보청기 3번 재충전 가능</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>최대 19 시간</p> <p>4시간 완전 충전 시</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>최대 5 시간</p> <p>30분 급속 충전 시</p> </div> </div> <p>* 완전 충전된 충전기로 보청기 3번 재충전 가능</p>	-
충전기 옵션	 액티브 프로 / 액티브 충전기	 스타일레토 충전기	-

\* 스트리밍 사용 정도에 따라 보청기 사용 시간 상이할 수 있음

모델	퓨어 C&G X	모션 C&G X	모션 C&G P X	모션 C&G SP X
난청적합범위	경 중 고	경 중 고	경 중 고	경 중 고 심
출력/이득	S : 108/45 M : 119/60 P : 124/70 HP : 130/75	썬튜브 3.0 : 125/60 썬튜브 3.0 P : 126/63 이어후크 : 133/60	썬튜브 3.0 : 130/66 썬튜브 3.0 P : 131/70 이어후크 : 135/77	이어후크 : 140/82
배터리	리튬이온충전식 배터리	리튬이온충전식 배터리	리튬이온충전식 배터리	리튬이온충전식 배터리
충전 및 사용시간	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>최대 23 시간</p> <p>3시간 완전 충전 시</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>최대 7 시간</p> <p>30분 급속 충전 시</p> </div> </div> <p>* 완전 충전된 충전기로 보청기 3번 재충전 가능</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>최대 24 시간</p> <p>3~4시간 완전 충전 시</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>최대 7 시간</p> <p>30분 급속 충전 시</p> </div> </div> <p>* 완전 충전된 충전기로 보청기 3번 재충전 가능</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>최대 30 시간</p> <p>3시간 완전 충전 시</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>최대 6 시간</p> <p>30분 급속 충전 시</p> </div> </div> <p>* 완전 충전된 충전기로 보청기 3번 재충전 가능</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>최대 61 시간</p> <p>3시간 완전 충전 시</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>최대 6 시간</p> <p>30분 급속 충전 시</p> </div> </div> <p>* 완전 충전된 충전기로 보청기 3번 재충전 가능</p>
충전기 옵션	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>프리미엄 (7/5/3)</p>  C&amp;G 충전기 II                     </div> <div style="text-align: center;"> <p>에센셜 (2/1)</p>  C&amp;G 충전기 E                     </div> </div>	<div style="text-align: center;"> <p>모션 C&amp;G X</p>  C&amp;G 충전기 II                 </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>모션 C&amp;G P X 기본</p>  스탠다드 충전기                     </div> <div style="text-align: center;"> <p>모션 C&amp;G P X</p>  드라이 앤 클린 충전기                     </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>모션 C&amp;G SP X 기본</p>  스탠다드 충전기                     </div> <div style="text-align: center;"> <p>모션 C&amp;G SP X</p>  드라이 앤 클린 충전기                     </div> </div>


\* 스트리밍 사용 정도에 따라 보청기 사용 시간 상이할 수 있음



# 시그니아 Nx

7Nx / 5Nx / 3Nx / 2Nx / 1Nx

시그니아 Nx 주요 기능

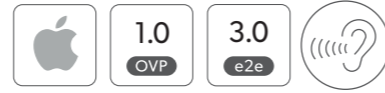

## 인시오 Nx

- 착용자의 귀 모양에 따라 착용이 용이한 맞춤형 제품
- 첨단 3D 스캐닝 및 모델링으로 정교한 보청기 제작
- IIC/CIC/ITC 타입 중 선택 가능(ITC BT는 블루투스 가능)

## 모션 13 P Nx

- 고심도 난청인도 사용 가능한 강력한 출력
- 유소아 난청인을 위한 옵션 제공 (컬러 이어몰드 및 스몰 이어후크)
- 블루투스로 쉽고 자유로운 스트리밍 가능 / 시그니아 앱 지원

모델	인시오 Nx IIC	인시오 Nx CIC	인시오 Nx ITC	인시오 Nx ITC BT	모션 13 P Nx
난청적합범위	경 중	경 중 고	경 중 고	경 중 고	경 중 고
출력/이득	113/50	113/50 118/55 124/65	113/50 118/55 124/65	113/50 118/55 124/65	튜브 : 130/65 이어후크 : 135/77
배터리	10A	10A	312	312	13

\* 스트리밍 사용 정도에 따라 보청기 사용 시간 상이할 수 있음

# 시그니아 px

시그니아 px 주요 기능



## 인투이스 3 / 프롬프트

- 개인의 귀 모양에 따라 착용이 용이한 맞춤형 제품
- 첨단 3D 스캐닝 및 모델링으로 정교한 보청기 제작

## 인투이스 3 / 프롬프트

- 고심도 난청인도 사용 가능한 강력한 출력
- 견고한 디자인
- 로커 스위치로 편리한 사용

## 인투이스 3 RIC

- 리시버를 교체해서 다양한 출력대 사용 가능
- 로커 스위치로 편리한 사용

모델	인투이스 3 / 프롬프트 CIC	인투이스 3 / 프롬프트 ITC	인투이스 3 / 프롬프트 P	인투이스 3 / 프롬프트 SP	인투이스 3 RIC
난청적합범위	경 중 고	경 중 고	경 중 고	경 중 고 심	경 중 고
출력/이득	113/50 118/55 124/65	113/50 118/55 124/65	이어후크 : 134/70	이어후크 : 140/80	S : 108/45 M : 119/60 P : 124/70 HP : 130/75
배터리	10A	312	13	675	312



# 보청기 액세서리

## 오디오 스트리밍(Audio Streaming)



**스트림라인 TV**  
블루투스 기능을 지원하는 시그니아 보청기와 함께 사용하면 TV 소리를 보청기로 보다 선명하게 들을 수 있습니다.



**스트림라인 마이크**  
블루투스 기능을 지원 하는 모든 스마트폰과 시그니아 보청기를 연결해줍니다. 스마트폰을 통해 전화통화/음악청취 등 다양한 디지털 생활을 즐겨보세요.

## 리모컨(Remote Control)



**미니포켓**  
스마트폰을 사용하지 않거나 큰 사이즈의 리모컨을 원하지 않는 분들을 위한 액세서리입니다.

**크로스/바이크로스 (CROS/BiCROS)** 전농인 귀에 착용하여 반대편 보청기로 소리를 전달하여 들을 수 있게 해줍니다.


### 크로스 오픈형 C&G



### 크로스 오픈형 312



### 크로스 스타일레토

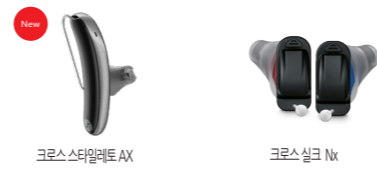

## 보청기 충전기



**C&G 충전기 III**  
퓨어 C&G AX 전용의 무선 충전기입니다.  
- 퓨어 C&G TAX \*  
- 퓨어 C&G AX \*

**C&G 충전기 II**  
모든 C&G X 보청기와 호환 가능하며 충전기 덮개가 있어 보청기를 더욱 안전하게 보호할 수 있고 충전하는 동안 보청기 건조도 가능합니다.  
- 퓨어 C&G 7/5/3 X \*  
- 모션 C&G 7/5/3 X \*

**C&G 충전기 E**  
충전기에 올려 놓기만 해도 자동으로 충전됩니다.  
- 퓨어 C&G 2/1 X \*  
- 모션 C&G 2/1 X \*

**스타일레토 충전기**  
충전 케이스 안에 넣어 두기만 하면 자동 충전되어 휴대성과 이동성이 뛰어납니다.  
- 스타일레토 AX \*  
- 스타일레토 X \*

**인시오 AX 충전기**  
인시오 C&G AX 전용의 무선 충전기입니다.  
- 인시오 C&G AX \*

**드라이 앤 클린 충전기**  
보청기 충전과 건조 그리고 UV 살균을 지원하는 충전기입니다.  
- 스타일레토 AX  
- 퓨어 C&G TAX  
- 퓨어 C&G AX  
- 모션 C&G SP X  
- 모션 C&G PX \*

**스탠다드 충전기**  
보청기를 넣어 간편하게 충전할 수 있는 기본형 충전기입니다.  
- 퓨어 C&G TAX  
- 퓨어 C&G AX  
- 모션 C&G SP X \*  
- 모션 C&G PX \*

**시그니아 액티브 충전기**  
기성형 보청기 시그니아 액티브 프로와 액티브 전용의 무선 충전기입니다.  
- 시그니아 액티브 프로 \*  
- 시그니아 액티브 \*

\* 해당 모델 구매시 기본 제공

## 전용 앱(App)



**시그니아 앱**  
오디오 스트리밍, 리모컨, 원격 상담 등 보청기 사용에 필요한 다양한 기능과 서비스를 제공하는 앱

\* 시그니아 앱은 애플 앱스토어나 구글 플레이스토어에서 '시그니아'를 검색하여 무료로 다운로드할 수 있습니다.

## 보청기 관리용품



**스마트 UV 건조기 (별도 판매)**  
보청기 충전과 동시에 건조와 자외선 살균 기능까지 탑재

**\* 제품 기능 (C&G 충전기 E를 사용하는 보청기 전용)**  
- 작동시간 : 90분 (충전 완료 시 건조기능 자동 꺼짐)  
- 자외선 살균 및 건조 : 전자 시스템으로 온도 조절



**퍼펙트 UV 건조기 (별도 판매)**  
보청기 건조 및 살균 관리 기능 탑재

**\* 제품 기능 (모든 보청기와 호환 가능)**  
- 작동시간 : 30분 (완료 후 전원 자동 꺼짐)  
- 자외선(UV) 살균 : 99% 살균 (5분 사용)



**실리카겔 세트**  
모든 시그니아 보청기 구매 고객에게 증정! 심플하지만 꼭 필요한 제품으로만 구성

**\* 제품 구성**  
- 계습통 & 계습제  
- 청소천  
- 청소침  
\* 기존의 보청기 관리 키트에서 전면 교체

# 액세서리 호환표

		슬림오픈형 보청기		오픈형 보청기				기성형 보청기	
		스타일레토 AX	스타일레토 X	퓨어 C&G AX	퓨어 312 AX	퓨어 C&G X	퓨어 312 X	인투이스3	액티브 프로 액티브
오디오 스트리밍	스트림라인 TV	●	●	●	●	●	●		●
	스트림라인 마이크	●	●	●	●	●	●		●
크로스	크로스 스타일레토 AX <span style="color:red">New</span>	●							
	크로스 퓨어 C&G AX <span style="color:red">New</span>			●					
	크로스 퓨어 312 AX <span style="color:red">New</span>				●				
	크로스 퓨어 C&G X					●			
리모컨	미니포켓	●	●	●	●	●	●	●	●
	시그니아 앱	●	●	●	●	●	●	●	●
슬리브	슬리브 3.0 <span style="color:red">New</span>	●		●	●				
	클릭 슬리브 2.0		●			●	●	●	●
오디오 스트리밍	스트림라인 TV	●	●	●	●	●	●	●	●
	스트림라인 마이크	●	●	●	●	●	●	●	●
크로스	크로스 퓨어 C&G AX <span style="color:red">New</span>	●							
	크로스 퓨어 C&G X					●	●	●	
	크로스 퓨어 312 Nx		●					●	
리모컨	미니포켓	●	●	●	●	●	●	●	●
	시그니아 앱	●	●	●	●	●	●	●	●
이어후크 / 신티브	신티브 3.0					●	●		
	신티브 3.0P					●	●		
이어후크	신티브							●	
	이어후크	●	●	●	●	●	●	●	●

- 액세서리 : 보청기 1년, 반품 불가  
- 크로스는 7/5/3만 호환 가능

\* WL(Wireless) 옵션 필요



스마트폰으로 보청기 조절을 간편하게

# 시그니아 앱



볼륨 조절에서 원격 피팅, 시그니아 어시스턴트까지! 이제 스마트폰만 있으면 쉽고 간편하게 시그니아 보청기를 이용하실 수 있습니다.

### 시그니아 앱 주요 기능

#### 스트리밍 연결

- 오디오 스트리밍 액세서리를 쉽게 사용 및 관리
- 스트리밍 연결 중 볼륨 조절

#### 리모컨 기능

- 볼륨 조절
- 청취 프로그램 조절
- 고주파수 영역 조절
- 방향성 청취 설정

#### 텔레케어 기능

- 원격 피팅
- 실시간 문의 및 상담
- 일일 만족도 평가

#### 보청기 설정 및 상태 확인 기능

- 스트리밍 연결 확인
- 배터리 잔량 확인

#### 청취 프로그램

- 사용자가 보청기에 빠르게 적응할 수 있도록 다양한 대화 상황 제공

손끝에서 만나는 인공지능

# 시그니아 어시스턴트


세계 최초 실시간 DNN(심층신경망) 머신러닝이 가능한 보청기 조절 앱! 전 세계 시그니아 보청기 사용자의 데이터가 시그니아 어시스턴트에 축적되고 이를 바탕으로 스스로 학습하고 진화하여 사용자에게 더욱 정확한 해결책을 제공해드립니다.

### 시그니아 어시스턴트를 사용하려면

- 블루투스 기능이 탑재된 X 플랫폼 이상 시그니아 보청기 보유
- 스마트폰에 '시그니아 앱' 다운로드 후 설치(앱스토어/구글플레이스토어)

### 시그니아 어시스턴트 주요 기능

- 최적화된 개인 맞춤형 소리 설정
- 24시간 대기 중인 나만의 청각전문가
- 세계 최초 머신 러닝의 보청기 지원 앱
- 쉽고 재미있는 메신저 대화 방식

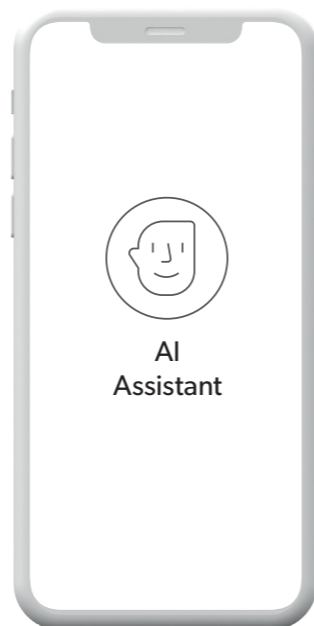

나의 건강 상태를 체계적으로 관리하는

# My 웰빙

시그니아 앱에 새롭게 업데이트된 'My 웰빙' 기능! 사용자가 혼자서도 본인의 건강상태 전반을 한 눈에 체크할 수 있도록 중요한 지표들을 보여줍니다. 새롭게 추가된 피트니스 기능을 통해 더 활동적이고 에너지 넘치는 일상을 보내시기 바랍니다. (AX 플랫폼 제품만 지원합니다.)



#### My 걸음

하루 활동량 체크의 기본, 걸음 수 확인! 시그니아 보청기에 탑재된 모션센서가, 착용자가 하루에 몇걸음을 걸었는지 기록합니다.



#### My 활동

활발한 신체 활동은 건강한 삶에 필수! 착용자가 얼마나 신체 활동을 하고 있는 지 기록합니다.



#### My 착용

나의 보청기 착용 시간은? 보청기 착용 시간을 모니터링함으로써, 올바른 보청기 착용 습관을 들일 수 있도록 지원합니다.



#### My 대화

나는 사람들과 얼마나 교류할까? 시그니아의 OVP기능은 착용자의 대화 시간을 기록하여, 일정 수준의 사회 참여도를 유지할 수 있도록 도와드립니다.



# 제품색상

## 슬림오픈형 / 오픈형 / 귀걸이형

모델	컬러													
	베이지	그레나이트	그레이	브라운	블랙	실버	펄 화이트	골든 블론드	샌디 브라운	다크 샴페인	다크 그레나이트	딥 브라운	화이트	
	1	2	3	4	5	6	7	30	31	37	66	72	245	
스타일레토 AX														
퓨어 C&G AX	•				•		•		•	•		•		
퓨어 C&G T AX	•				•		•		•	•		•		
퓨어 312 AX	•				•		•		•	•		•		
모션 C&G X	•	•	•		•		•		•	•		•		
모션 C&G P X	•	•	•		•		•		•	•		•		
모션 C&G SP X	•	•	•		•		•		•	•		•		
스타일레토 X <sup>1)</sup>					•									•
퓨어 C&G X	•	•	•		•		•		•	•		•		
퓨어 312 X	•	•	•		•		•		•	•		•		
모션 13P Nx	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
인투이스 3	•		•	•	•	•					•			
인투이스 3 RIC 312	•		•	•	•	•								
프롬프트	•		•									•		

1) 스타일레토 2/1X는 올블랙과 올화이트만 가능

실버 (new)	로즈골드	샌디 브라운/블랙	실버블랙	로즈골드 네이비	로즈골드 화이트	그래파이트 블랙	골드블랙	실버 네이비	실버 화이트	골드 화이트	그래파이트	파인골드	골드 네이비
926	927	HC4									646	647	
			•	•	•	•	•	•	•	•			•
•	•										•	•	
•	•										•	•	
•	•										•	•	
•	•												
•	•												
•	•												
		•	•	•									
•	•												
•	•												

## 기성형 귀속형

컬러	시그니아 액티브 프로 / 액티브
• 올블랙	•
• 실버블랙	•
• 로즈골드화이트	•

## 귀속형

면판 컬러	인시오 C&G AX ITC
• 베이지	•
• 블랙	•
• 다크브라운	•
• 모카	•
• 브라운	•

셸 컬러	
• 레드	•
• 블루	•
• 베이지	•
• 블랙	•
• 다크브라운	•
• 모카	•
• 화이트	
• 펄골드	
• 펄그린	
• 펄퍼플	
• 펄마젠타	

인시오 Nx IIC	인시오 Nx CIC	인시오 Nx ITC	인투이스 3 CIC 프롬프트 CIC	인투이스 3 ITC 프롬프트 ITC
		•		•
•	•			
•		•		•
•	•	•	•	•
	•	•	•	•
•		•	•	•
•		•	•	•
•		•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•



# 혁신의 아이콘!

# 시그니아 보청기

## 140년 역사와 전통

오늘날 보청기 업계에서 가장 혁신적인 브랜드로 알려진 시그니아! 새로운 기술과 혁신적 제품을 지속적으로 선보임으로써 국내는 물론, 전 세계 시장에서 사랑받고 있는 글로벌 브랜드입니다.

1800


18~19세기



보청기가 없던 시절, 뿔 모양의 관으로 소리를 모아 들음

1900

1910년대

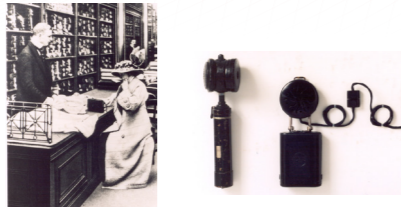

전화기술을 이용한 최초의 전기 제품으로의 보청기

2000

2002



세계 마이크가 장착된 보청기 출시

2004



세계 최초 양이통신 보청기 개발

## 국내외 수상실적(Awards)

기술적 혁신성



2022 CES 2개 부문 추가 수상 (Accessibility / Wearable technologies)

뛰어난 디자인



2019 iF 디자인 어워드 금상



2019 레드닷 디자인 어워드 제품 디자인 부문 본상



2021 iF 디자인 어워드 수상  
2022 iF 디자인 어워드 수상

기타 수상 내역



2019 대한민국 퍼스트 브랜드 대상 - 보청기 부문 대상



2018 / 2019 대한민국명가명품 대상



2017 CES Innovation Awards



2016 보건복지부 장관상



2016 프리미엄 브랜드 대상



2015 에디슨 금상



2014 대한민국 대표브랜드 대상

2016

2016



Life sounds brilliant.



primax 신규 플랫폼 론칭

지멘스 보청기의 전통을 잇는 시그니아 브랜드 론칭

2020+


2020



세계 최초

보청기에 직접 모션센서 탑재 Signia Xperience 플랫폼 론칭

1878

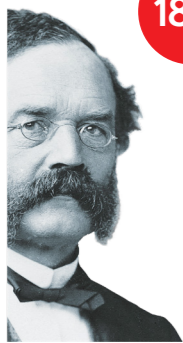

세계 최초

보청기의 원리 발견 베르너 폰 지멘스는 음질을 개선하려는 목적으로 말굽의 편자 자석을 이용해 개발한 전화 수신기가 음성 신호를 증폭한다는 보청기의 원리를 발견함

1951



지멘스 포켓 보청기 출시 Phonophor Alpha

1966



귀속형 보청기 개발

2008



오디오 기기와 무선연결이 가능한 TEK 개발

2010



보청기 역사에 한 획을 긋는 BestSound™ Technology 출시

2011



세계 최초

IP68 완전 방수 방진 보청기, 아쿠아리스 개발

2017



세계 최초

충전식 보청기 셀리온 출시

2018



세계 최초

자연스러운 본인 목소리 처리기술의 OVP™ 적용 플랫폼, Signia Nx 출시

2021



세계 최초

충전식 고출력 귀걸이형 보청기 출시

1987



최초의 보청기 리모컨 개발

1997



세계 최초

두개 마이크 디지털 보청기 개발

2014



binax, 정상 청력보다 더 잘 들을 수 있는 좁은 방향성 보청기 개발

2015



양이 원마이크 방향성, 초소형 모델에서도 한 개의 마이크로도 양이 방향성을 구현

2018

원격 피팅이 가능한 TeleCare 3.0



세계 최초

양이무선통신 & 블루투스 동시 구현

2019



세계 최초

슬림 리튬 이온 배터리 장착 충전식 보청기 '스타일레토' 출시

2022



세계 최초

말소리와 배경음을 분리하는 시그니아 AX 플랫폼 출시!



보청기의 경계를 허무는 디자인, '시그니아 액티브' 출시